

Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (sur : www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 180 kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer des personnes de et vers le brancard Marina.

Commande manuelle électrique

Réglage vers le haut




Réglage vers le bas



Mise en marche



2 secondes

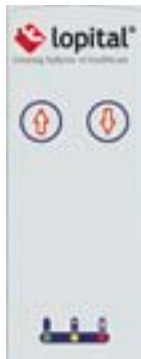

Commande hydraulique



Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.




Utilisation


1. Activez le brancard Marina en enfonçant le bouton de réglage vers le haut 2 secondes.
Rem. : Après utilisation, Marina entre en veille après 60 minutes (Marina en version électrique).
2. Ajustez le brancard à la position et hauteur souhaitées.
3. Mettez le frein du brancard.
4. Rabattez les barrières latérales.
5. Faites glisser la personne à mobilité réduite avec p.ex. un EasySlide de ou vers le brancard Marina.
6. Réglez le plan du brancard quelques centimètres plus haut et fermez la barrière ouverte.
7. Relevez le frein du brancard Marina.

Frein de roue

1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

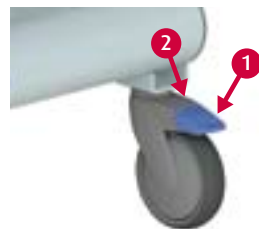

Barrière latérale

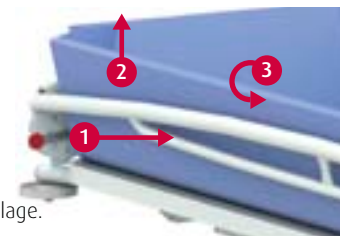

1. Déverrouillage.
2. Relever.
3. Pivoter.

La barrière se verrouille automatiquement à la fermeture.

Assurez-vous que le cordon de la commande ne soit pas coincé en refermant la barrière (Marina en version électrique).

Rechargement des batterie (électrique)

Après utilisation, raccordez le brancard Marina au chargeur pour maintenir les batteries.



Éteint
Vert
Orange clignotant
Orange
Rouge clignotant
Rouge

État de veille.
Équipement opérationnel.
L'arrêt d'urgence est activé.
Batterie à mi-charge.
Batterie quasi déchargée.
Batterie déchargée.

En cours de chargement de batterie, le brancard Marina n'est pas utilisable.

Abaissement d'urgence (électrique)

En cas d'arrêt de toutes les fonctions, le brancard Marina peut être abaissé en utilisant le bouton d'abaissement d'urgence.



Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, le brancard Marina doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs (p.ex. du chlore). Vérifiez régulièrement que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières et nettoyez-les le cas échéant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.

Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr